

CITREX H5 testset

De beste mobiele analysator in zijn klasse

analyser
the art of measuring


Het complete meetsysteem voor veeleisend gebruik

Met de CITREX H5 testset bent u perfect uitgerust voor uw dagelijkse werk. Het hoge precisie meetinstrument CITREX H5 is de ideale oplossing om uw gasstroom en druk producerende apparaten eenvoudig en nauwkeurig te controleren en te kalibreren. De uitgebreide accessoires omvatten alle benodigde onderdelen die nodig zijn voor een accurate meting.




CITREX H5

De CITREX H5 is ideaal voor mobiel gebruik door zijn robuuste en compacte design. Het apparaat meet bi-directionele stromingen, druk, temperaturen en zuurstof concentraties. Het hoge resolutie kleuren touchscreen van 4.3" vertoont numerieke, grafische en trending gegevens perfect. De intuïtieve gebruikersinterface is gemakkelijk te configureren, met opties om meerdere profielen op te slaan voor veel verschillende toepassingen. Met een keuze uit 26 verschillende stroom, druk en beademingsparameters, plus trend data, is het mogelijk om de CITREX H5 precies naar uw behoeften in te stellen.

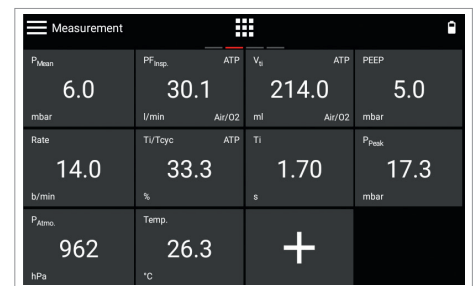

FlowLab

De testset wordt inclusief de FlowLab software geleverd. Deze software kan alle parameters tot in detail registreren. Realtime curves in hoge resolutie, trending en geavanceerde mogelijkheid om in Excel te registreren maken deze software onmisbaar bij research. Gedetailleerde, aangepaste rapportages kunnen worden aangemaakt, opgeslagen en geprint.

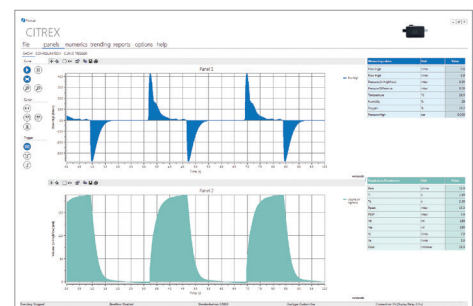

Sensoren

De CITREX H5 is voorgeprogrammeerd met 17 verschillende gasnormen en 8 verschillende gastypes. Het apparaat berekent en rapporteert alle relevante beademingsparameters. Deze kunnen dan worden doorgegeven via een van de vele interfaces en worden opgeslagen op een geheugenkaart. De differentiële drukverbinding met een meetbereik van ± 200 mbar en de hoge druk verbinding met een bereik van 0 - 10bar zorgt voor zeer nauwkeurige drukmetingen bij veel verschillende toepassingen.



CITREX H5 testset bevat:

- CITREX H5
- SmartLung Adult (1L)
- CITREX Webserver configurator en monitoring
- FlowLab software
- Zuurstofsensor
- Adapterset
- Laminaire flowbuis
- Autoadapter
- Micro SD geheugenkaart
- Beschermingsfilter
- USB kabel
- Ethernet kabel
- Stroomvoorziening
- Draagtas
- Accu
- USB adapter
- Quick start manual



Order number: 304.555.000



CITREX H5 testset voor inspectie en certificering:

- CPAP/ bi-level beademingsapparatuur
- ICU beademingsapparatuur
- Hoge frequentie beademingsapparatuur
- Bloeddrukmeters
- Zuurstofconcentrators
- Spirometers
- CO2 insufflators
- Medische gas benodigheden



JRM Medical B.V. Langeweg 7J 3233 LM Oostvoorne
info@jrmmedical.nl +31 (0)181 319 493 www.jrmmedical.nl

IMT.Analytics